

ヘルシーガード

Healthy Guard

AHG-100

家庭用デジタル体重計

取扱説明書



表示部

■ 表示部



0.0 kg と表示されれば、計測可能になります。
本機に乗るだけで電源が入り計測ができます。
計測しないと画面は消えます。

このたびは、当社の家庭用デジタル体重計をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用の前に

⚠ 警告

- 一般家庭用の為、業務用（病院等での計測や医療もしくは治療目的）では、絶対に使用しないでください。業務用として病院等で使用する為の機能を備えておりません。病院等、医療もしくは治療目的での計測は、絶対に使用しないでください。
- すべりやすい所（タイル面やぬれた床）では絶対に使用しないでください。転倒したり、すべったりしてけがををするおそれがあります。また本機内部に水が侵入し故障の原因になります。
- 本機の端に乗ったり、飛び乗ったり、飛び跳ねたりしないでください。転倒したり、すべったりしてけがををするおそれがあります。また、故障の原因にもなります。
- 体がぬれたまま乗らないでください。すべて転倒し、けがををするおそれがあります。
- 修理・分解・改造は絶対に行わないでください。故障や事故の原因になります。
- 体の不自由な方がご使用になる場合は、1人では計測しないでください。必ず介護者の方が乗り降りの援助を行ってください。なお、手すりなどを利用した場合の計測値は参考値として捉えてください。
- 計測結果は、決して自己判断しないでください。計測値やそれに基づく運動メニュー等は、必ず医師または、資格をもった専門家の指示に従ってください。

⚠ 注意

- 本機の表示部の上に乗らないでください。表示部が破損してけがををするおそれがあります。
- 本機の隙間や穴に指を入れしないでください。けがををするおそれがあります。
- 乳幼児には、絶対に持ち運びさせないでください。落としてけがををするおそれがあります。
- 電池をいれるときは、＋－を確認して正しく装着してください。発熱、液漏れ等による、火災やけがの原因になります。また、長期間ご使用にならない場合は、電池を本機から取り外してください。
- 強い磁気のそばでは使用しないでください。携帯電話やマイクロ波治療器等を本機の近くで使用すると故障の原因となるおそれがあります。
- 直射日光の当たる場所や高温になる場所には置かないでください。故障の原因になります。

お使いになる前に

- できるだけ裸に近い状態で計測してください。着衣によって計測値は変化します。
- 変化の推移を見る場合は、できるだけ同時刻、同条件のもとで計測してください。体内の水分の変化に影響されるので、毎日同じ時間、条件で計測することをおすすめ致します。
- 計測前に過度の飲食をしたり、極度の脱水症状の時の計測をさけてください。計測値に誤差を生じるおそれがあります。できるだけ起床直後をさけ、食後3時間以上経過した同じ時間帯にご使用してください。
- 硬く平らな床の上において計測してください。じゅうたんや、畳クッションフロアの上では正確に計測できません。
- 必ず本機を床に置いたあとに乗って計測してください。
床に置く前に起動すると正しく計測できない場合があります。

使用上のご注意

※本機は、精密に作られています。長く最良の状態を保つため、次のことを守ってご使用ください。

- 分解をしたり水洗いは絶対しないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。また振動の激しい場所での計測、保管はしないでください。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近く、または空調機の風が直接当たる場所での計測、保管はさけてください。
- 温度変化の激しい場所での使用はさけてください。
- 湿気、水気の多い場所には置かないでください。サビや故障の原因となります。
- 熱湯やベンジン、シンナー等は絶対に使用しないでください。

※汚れたときは、水または家庭用中性洗剤を柔らかい布に濃し固く絞って拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。

電池のセット、交換


■電池のセット

- 1、電池カバーを開き、電池を入れてください。
- 2、全表示後、0.0kgが表示されます。
- 3、電池カバーをカチッと音がするまで押し込んでください。
- 4、硬く平らな床の上に本機を置いてください。



- 初めてのご使用、また電池交換後は、電池を入れて電源が切れる前に硬く平らな床の上に体重計をセットしてください。
- 体重を計測し、体重計を降りてから、電池が切れるまで体重計を動かさないでください。次回計測する際、正しく計測できない場合があります。

裏面

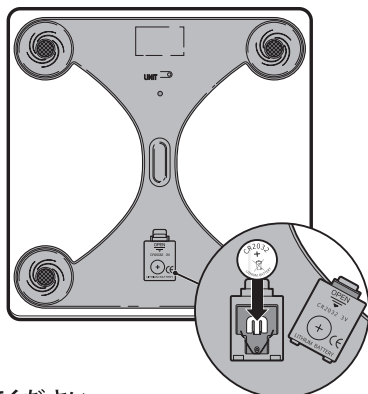

電池ボックス
(CR2032)

■電池の交換

- 表示部にLOが点灯したら、新しい電池 (CR2032) と交換してください。
- 裏側のバッテリーカバーを取り外し、電池を取り外してください。
- +-を間違えないようにセットしてください。

計測のしかた

- 1、電源OFFの状態でお乗りください。
- 2、本機に乗るだけで電源が入り計測ができます。計測が終わると2回点滅して計測終了です。



計測終了

体重の結果が表示され計測が終了します。
計測終了後5～15秒すると電源が切れます。

※計測が終了する前に本機から降りないでください。
表示される前に降りると0.0kgと表示されます。

●オートオフ機能

※電源の切り忘れを防ぐために、自動で電源が切れるようになっています。

- 計測後、体重の結果が表示され、電源が切れます。
- 0.0kg表示後、本機に乗らなかつたり、計測途中で本機から降りた場合、約5～15秒で電源が切れます。

●下記のような表示がでたら



電池の残量が少ないと表示されます。新しい電池と交換してください。

■ 仕 様

型 番	AHG-100
計量範囲	5～136kg
最小表示(目量)	100g
電 源	DC3V(CR2032)
本体寸法	約幅 260×奥行 260×高さ 22mm
本体重量	約1160g
材 質	強化ガラス・ABS樹脂

計量精度の保証範囲

5～68kgまではかる場合	±200g
68kgを超えて136kgまではかる場合	±300g

本製品は計量法で定められた技術基準に基づいて製造、検査しております。ご使用の場合ははかられた重さに対し、上記の範囲まで精度を保証いたします。

※日本国内の各地域の重力値には若干の差があります。この影響により計量値に誤差が発生することがあります。

※本機はご家庭での計測が主な目的ですので、業務用(品物の売買取引やその他の目方を証明する場合)にはお使いになれません。

■ アフターサービスについて

本製品に万一、不具合な点がありましたら保証書をそえて、お買上げ頂きました販売店、または弊社アトラスまでお問い合わせください。

保 証 書

◆ 無料修理規定 ◆

品 名	家庭用デジタル体重計 AHG-100		
保証期間	お買上げ日より 1年間		
お買上げ日	年	月	日
お 客 様	ご住所		
	お名前 _____ 様		
	電 話 ()		
販 売 店	住所・店名		
	電 話 ()		
輸入販売元	株式会社アトラス TEL.042-660-8870		

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- 保証期間内に故障して無料修理を、お受けになる場合には、弊社アトラスに連絡の上、商品と保証書を送り頂くか、お買上げ販売店へ修理をご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
イ 本書のご提示がない場合。
ロ 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
ハ 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。
ニ 火災、地震、水害、落雷、雪、その他天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- ご贈答品等で本書に記入してあるお買上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、弊社アトラスへご相談ください。
- 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

輸入販売元 **株式会社 アトラス**

〒192-0906 東京都八王子市北野町549-1 第2石坂ビル
TEL.042-660-8870 <https://www.atlas-scm.jp/>